

# homecraft Ascot Combined Board and Seat System

|          | CODE          | 09 CODE     | US CODE     |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| Standard | <b>AA1100</b> | 09 107 2701 |             |
| Cut-away | <b>AA1104</b> | 09 107 2735 | 08 130 5028 |

## Intended uses

- To compensate for a disability by helping a person get into and out of a bathtub and by providing a stable sitting surface

## Instructions for installation

1. Remove the bath board (labelled **A** in Figure 1) from the seat (**B**) by loosening the seat height adjuster knobs (**C**) and pulling the securing legs (**D**) out of the seat height adjusters.
2. Position the seat in the bathtub and put the securing legs of the board through both parts of the seat height adjusters.
3. Allow the board to slide down until it rests on both bathtub side rims. Tighten the seat adjuster knobs to secure the board at the appropriate height.
4. Loosen both wing nuts on each side adjuster bracket of the board (**E**) and slide the brackets out until they fit snug against the sides of the bathtub. Tighten the four wing nuts securely.
5. A properly positioned board and seat system is shown in Figure 2.


## Care and Cleaning

The board and seat system can be cleaned with warm water and mild detergent or household disinfectant.

## Cautions

- The board and seat system is not to be used to support more than 127 kg / 280 lb / 20 st.
- Be sure the board and seat system is securely in place before putting weight on it.
- Cover the board and seat with a towel to help reduce slipperiness.

Maximum user weight  

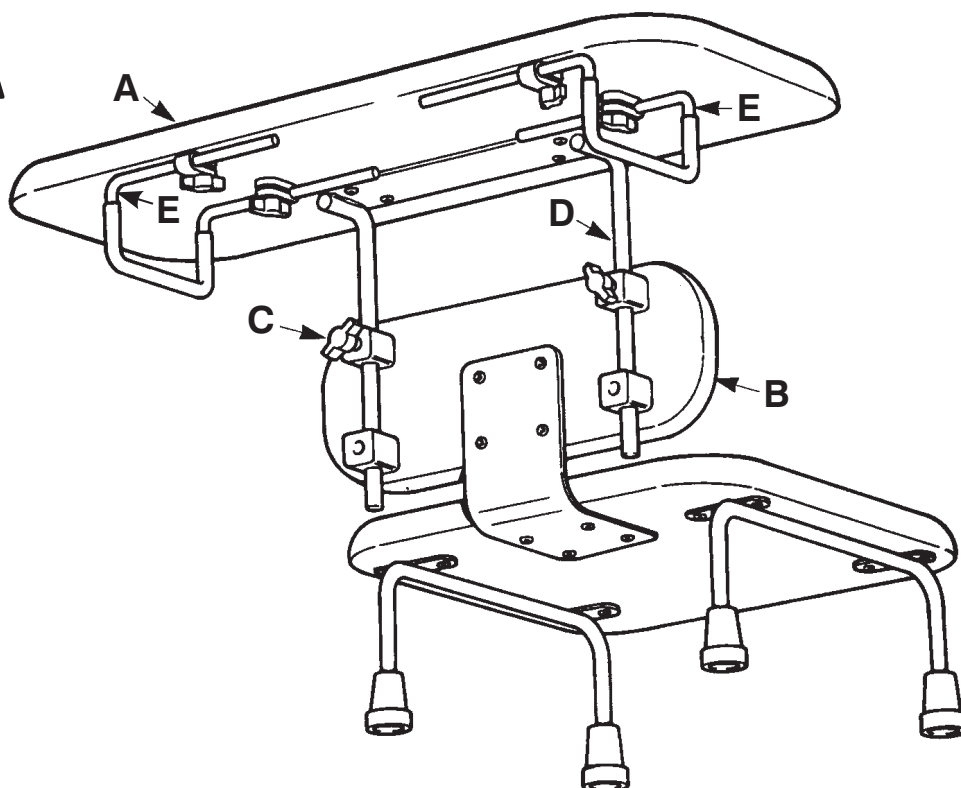

## F FRANÇAIS Système de siège et de planche de bain Ascot

Conservez ces instructions à titre de référence ultérieure.

### Indications

- Compensation d'un handicap en aidant la personne à entrer dans une baignoire et à en sortir, et en fournissant un siège stable

### Instructions d'installation

1. Retirez la planche de bain (**A**, figure **1**) du siège (**B**) en dévissant les boutons de réglage de hauteur du siège (**C**) et en ôtant les bras de fixation (**D**).
2. Placez le siège dans la baignoire et enfillez les bras de fixation de la planche dans les deux parties des boutons de réglage de hauteur du siège.
3. Laissez descendre la planche jusqu'à ce qu'elle repose sur les deux bords latéraux de la baignoire. Serrez les boutons de réglage de hauteur pour maintenir la planche à la bonne hauteur.
4. Desserrez les deux écrous à oreilles de chaque support de réglage latéral de la planche (**E**) et glissez les supports jusqu'à

ce qu'ils se trouvent plaqués contre les parois de la baignoire. Serrez à fond les écrous à oreilles.

5. La figure **2** illustre un système de siège et de planche de bain correctement positionné.

### Entretien et nettoyage

Le système de siège et de planche peut se nettoyer avec de l'eau chaude et un détergent doux ou un désinfectant ménager.

### Mises en garde

- Le système de siège et de planche ne doit pas soutenir plus de 127 kg.
- Veillez à ce que le système de siège et de planche soit bien calé avant d'y placer une charge.
- Couvrez la planche et le siège d'une serviette pour réduire les risques de dérapage.

## D DEUTSCH Ascot Badebrett- und Badewannensitzsystem

Bitte bewahren Sie diese Anleitungen zum späteren Nachlesen gut auf.

### Beschreibung

- Eine Hilfe zum Einsteigen in und Aussteigen aus der Badewanne und zugleich ein stabiler Sitz

### Installationsanleitung

1. Nehmen Sie das Badebrett (**A** in Abb. **1**) vom Sitz (**B**) ab indem Sie die Sitzhöhen-Einstellknöpfe (**C**) lösen und die Haltestangen (**D**) aus der SitzhöhenEinstellung ziehen.
2. Richten Sie den Sitz in der Badewanne aus und stecken Sie die Haltestangen des Bretts durch beide Teile der SitzhöhenEinstellung.
3. Lassen Sie das Brett nach unten gleiten bis es mit beiden Seiten auf dem Wannenrand aufliegt. Ziehen Sie die Sitzeinstellungsknöpfe fest, um das Brett in der gewünschten Höhe zu sichern.
4. Öffnen Sie die Flügelmuttern auf beiden Seiten der Bretthalterung (**E**) und schieben Sie die Halterungen nach außen bis sie fest an dem Badewannenwand anliegen. Ziehen Sie die vier Flügelmuttern fest.
5. Abbildung **2** zeigt ein richtig ausgerichtetes Brett- und Sitzsystem.

### Pflege und Reinigung

Das Brett und der Sitz können mit warmem Wasser und milder Seife bzw. einem Haushaltsdesinfektionsmittel gereinigt werden.

Zusätzlich können folgende Haushaltsdesinfektionsmittel bei maximaler Stärke eingesetzt werden:

- 74%iger denaturierter Ethylalkohol mit 4%igem Bezaikoniumchlorid auf Basis 1:40 mit Wasser verdünnt.
- 5%iges Benzylammoniumchlorid, auf Basis 1:50 mit Wasser verdünnt.
- 4%iges Benzalkoniumchlorid auf Basis 1:25 mit Wasser verdünnt.
- 4,8%iges Chloroxülenol B.P. auf Basis 1:40 mit Wasser verdünnt.

### Vorsichtsmaßnahmen

- Das Brett- und Sitzsystem kann ein Gewicht von maximal 127 kg tragen.
- Prüfen Sie, ob das Brett- und Sitzsystem richtig gesichert ist bevor Sie es belasten.
- Bedecken Sie Brett und Sitzfläche mit einem Handtuch, um die Schlüpfrigkeit zu verringern.

## E ESPAÑOL Sistema combinado de tabla y asiento Ascot

Conserve estas instrucciones para futura referencia.

### Indicaciones de uso

- Compensar una incapacidad ayudando a la persona a entrar y salir de la bañera y proporcionando una superficie de asiento estable

### Instrucciones de instalación

1. Desmonte la tabla del baño (marcada **A** en la figura **1**) del asiento (**B**) aflojando los pernos de los ajustadores de la altura del asiento (**C**) y sacando las patas fijadoras (**D**) de los ajustadores.
2. Coloque el asiento en la bañera y pase las patas fijadoras de la tabla por ambas partes de los ajustadores de la altura.
3. Deje que la tabla se deslice hacia abajo hasta que descansa uniformemente sobre los bordes laterales de la bañera. Apriete los pernos de los ajustadores del asiento para asegurar la tabla a la altura adecuada.

4. Afloje las dos tuercas de mariposa situadas en los apliques de los ajustadores a cada lado de la tabla (**E**) y deslice los apliques hacia fuera hasta que se apoyen firmemente contra el lateral de la bañera. Apriete bien las cuatro tuercas de mariposa.

5. En la figura **2** se ilustra un sistema combinado de tabla y asiento bien colocado.

### Cuidado y limpieza

El sistema de tabla y asiento puede limpiarse con agua caliente y un detergente suave o un desinfectante para el hogar.

### Precauciones

- El sistema de tabla y asiento no debe utilizarse para soportar más de 127 kg.
- Asegúrese de que el sistema de tabla y asiento esté firme en su lugar antes de poner peso sobre él.
- Cubra la tabla y el asiento con una toalla para no resbalarse.