
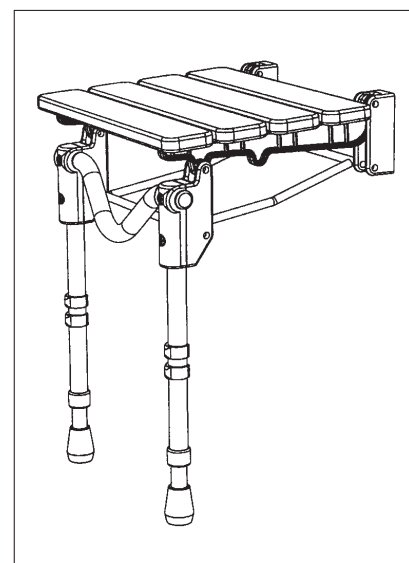


NEW CODE	OLD CODE	US CODE
09 107 6801	AA1690	08 130 5382
09 107 6850	AA1694	08 130 5390
09 107 6884	AA1697	

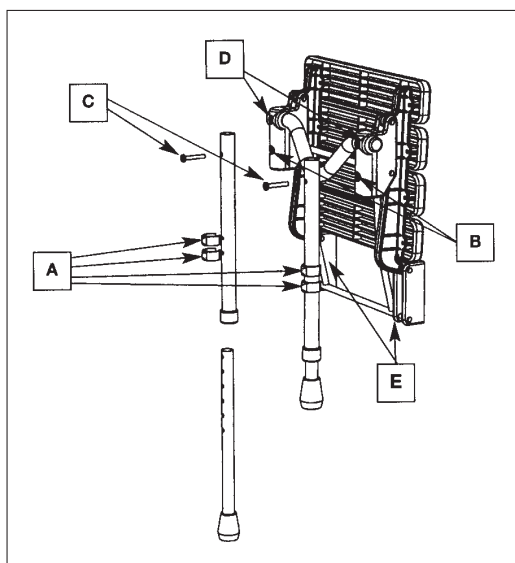

Intended uses

- To compensate for a disability by providing a seat for a person taking a shower.

Instructions for use

- The seat can be folded up out of the way when not in use. Be sure the latch holds the seat securely up.
- To lower the seat, hold onto the cross bar between screws D, and pull out from the wall.

Cautions

- DO NOT PULL ON THE LEGS TO LOWER OR RAISE THE SEAT.**
- Shower seats should be installed by a qualified professional.
- Shower seats should not be attached to plastic shower walls, stud partitioning, plasterboard-type cavity walls, or any similar type of shower surround or wall.
- The shower seats are not to be used to support more than 158kg / 348lb. / 24 $\frac{3}{4}$ st.
- The seats are not to be used with water that is colder than 5°C / 40°F or hotter than 50°C / 120°F.
- Be sure the seat is securely in place before putting weight on it.
- Use of a slip-resistant bath mat is strongly recommended.
- Cover the seat with a towel to help reduce slipperiness.

Instructions for installation

- These seats should be installed by a qualified professional, who will choose hardware appropriate for the specific installation. **Note that each individual fixing should resist a shear force of 60 kg / 130 lb. and a pull-out force of 20 kg / 45 lb.**
- Remove the screws that are labelled C in the drawing from each block (B) and loosen the screws that are labelled D.
- Slide the legs into the blocks and tighten screws D. Screws C can be left out at this stage.
- Establish the height of the seat, which can be adjusted from 460 to 590 mm / 18 to 23 inches as follows:
 - With the seat in the horizontal position, position the rear brackets (E) against the shower wall.
 - To adjust leg length, remove the four pin clips (A) from the legs, determine the appropriate length, and replace the pin clips.
 - Be sure both legs are adjusted to the same height. A gap up to 5 mm / $\frac{3}{16}$ " under one leg is acceptable. However, if the angle of the shower tray results in a greater gap, the seat must be installed at an angle to compensate for it.

- Mark the lower securing holes through the rear brackets. All fixing holes in the rear bracket must be used. Remove the seat from the wall and drill and plug the wall.

- Loosen the screws D and remove the legs from the seat.
- With the seat locked in the vertical position, position the rear brackets over the holes and fasten the seat to the wall.
- Slide the legs back into the blocks and line up the leg securing holes. Replace and tighten screws C, and tighten screws D in the blocks.

Care and Cleaning

The seat can be cleaned with mild detergent and water.

These user instructions are available in large print, please contact Performance Health Customer Services for a copy. Please retain these instructions for future reference.

Manufactured for Performance Health International Ltd.

Nunn Brook Road, Huthwaite,
Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire,
NG17 2HU, UK.

UK:

Tel: 03448 730 035
Fax: 03448 730 100
www.performancehealth.co.uk

International:

Tel: +44 1623 448 706
Fax: +44 1623 448 784

Performance Health Supply, Inc.

28100 Torch Parkway Suite 700,
Warrenville, IL 60555-3938, USA.
Tel: 1-800-323-5547
Telefax: 1-800-547-4333

Performance Health Australia

Unit 3, 3 Basalt Road,
Pembury NSW, Australia 2145.
Tel: 1300 473 422
Fax: 1300 766 473

Performance Health France

Zone Industrielle de Montjoly,
11 Avenue de l'Industrie - CS 40712
08013 Charleville-Mézières Cedex, France.
Tel: 03 24 52 61 15
Fax: 03 24 52 90 34

**PERFORMANCE
HEALTH®**

Usages Prevus

- Pour permettre aux personnes handicapées de prendre une douche en position assise

Mode d'emploi

1. On peut replier le siège contre le mur lorsqu'il n'est pas utilisé. Assurez-vous que le loquet maintient le siège en position verticale.
2. Pour abaisser le siège, agrippez la barre transversale entre les vis D et éloignez-la du mur.

Precautions D'emploi

- **NE PAS TIRER SUR LES PIEDS POUR ABAISSER OU RELEVER LE SIÈGE.**
- Les sièges de douche doivent être installés par un ouvrier qualifié.
- Les sièges de douche ne doivent pas être fixés à des parois de douche en plastique, une cloison de support, un mur avec vide d'air en plâtre ou tout autre type similaire de paroi ou mur.
- Les sièges de douche ne doivent pas supporter des personnes de plus de 158 kg.
- Les sièges ne supportent pas une température d'eau inférieure à 5 °C ou supérieure à 50 °C.
- Vérifiez que le siège soit solidement fixé avant de s'asseoir dessus.
- L'utilisation d'un tapis de bain antidérapant est fortement conseillé.
- Recouvrez le siège d'une serviette de toilette pour réduire les risques de glissement.

Mode D'installation

1. Ces sièges de douche doivent être installés par du personnel qualifié qui saura choisir le matériel adapté à la spécificité de l'installation. **Remarque : toute fixation individuelle doit pouvoir supporter une force tangentielle de 60 kg et une force de traction de 20 kg.**
2. Retirez les vis C (voir schéma) des blocs (B) et desserrez les vis D.
3. Faites glisser les pieds dans les blocs et resserrez les vis D. À ce stade vous pouvez ignorer les vis C.
4. Réglez la hauteur du siège qui peut être ajusté de 460 à 590 mm de la façon suivante :
 - a. Tout en maintenant le siège à l'horizontale, fixez les supports arrière (E) contre le mur de la douche.
 - b. Pour ajuster la longueur du pied, retirez les quatre clips (A) du pied, déterminez la longueur désirée et replacez les clips.
 - c. Assurez-vous que les deux pieds sont à la même hauteur. Une différence de 5 mm est acceptable. Cependant, si le bac de la douche présente une différence de hauteur supérieure, le siège doit être installé en biais pour compenser.
5. Marquez l'emplacement des trous de fixation inférieurs à travers les supports arrière. Vous devez utiliser tous les trous de fixation du support arrière. Retirez le siège du mur et percez les trous et bouchez-les.

6. Desserrez les vis D et retirez les pieds du siège.
7. Tout en maintenant le siège à la verticale, posez les supports arrière sur les trous et fixez le siège contre le mur.
8. Faites glisser les pieds vers l'arrière, dans les blocs et alignez les trous de fixation des pieds. Replacez et resserrez les vis C, puis les vis D dans les blocs.

Nettoyage et entretien

Ces sièges doivent être nettoyés avec de l'eau et un détergent doux.

Conservez ces instructions à titre de référence ultérieure.