


Glide sheets are used for safe and easy movement of patients in a bed or in a chair. The outer cover is Bucktex, a waterproof breathable material. The inner surface is slippery nylon.

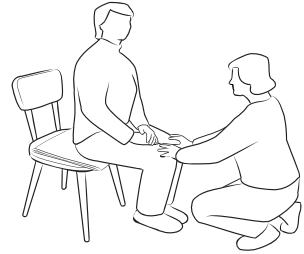

Uses: Turning patients while they are lying or sitting in bed.

Safe transfer from bed to chair.

Rotating patients from and into the prone position.

Sliding patient up in bed.



Benefit to the caregiver is also great, as easier moving of the patient reduces the strain on the caregiver's back.

Proper use of the glide sheet also prevents the effects of friction on the skin of the user.

Sizes available:

14A082 Glide sheet, 16" x 20" (41 x 51cm)

14A083 Glide sheet, 20" x 30" (51 x 76cm)

14A084 Glide sheet, 24" x 40" (61 x 102cm)




Precautions during use:

Make sure brakes are on (wheel)chair or bed before getting ready to transfer.

Make sure the sheet is inserted correctly and the colored sliding surface is on the inside.

Insert the sheet by 'log-rolling' the patient or asking the patient to lift themselves up from the surface. Whenever possible ask the patient to cooperate with the process.

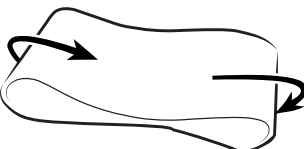


Remove the sheet by placing your hand between both layers of the glide sheet and invert by drawing the furthest bottom edge through the middle of the sheet. This effectively 'peels' the sheet out, without shearing effects.



Washing instructions:


Hand or machine-wash in 40 degrees Celsius. Hang to dry. Do not iron or expose to high temperatures. Do not bleach.

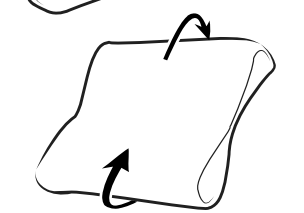

Note: Please use in accordance with your organization's policies and procedures. Do not leave the device near exposed or naked flames. Always ensure that this device is the appropriate equipment for the task of moving a particular patient.



Les toiles glissantes assurent le mouvement sécuritaire et facile d'un patient dans un lit ou dans une chaise. L'extérieur est en Bucktex (md), un matériel qui respire, et l'intérieur est en nylon glissant.

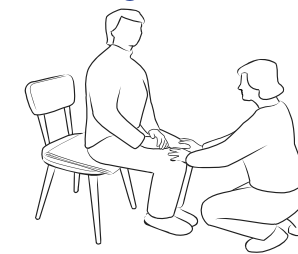

Usages: Pour retourner un patient lors qu'il est couché ou assis dans son lit

Pour un transfert sécuritaire du lit à un fauteuil

Pour faire tourner un patient d'une position à l'autre

Pour faire assoir un patient en le glissant dans son lit



La facilité avec laquelle on glisse un patient avec l'usage de ce produit bénéficie la personne qui assiste en réduisant le risque de se froisser un muscle dans le dos.


Le bon emploi de cette toile glissante élimine également les effets de la friction sur la peau du patient.

Grandeurs disponibles:

14A082 Toile glissante, 16 po x 20 po (41 cm x 50cm)

14A083 Toile glissante, 20 po x 30 po (51 cm x 76cm)

14A084 Toile glissante, 24 po x 40 po (61 cm x 102cm)

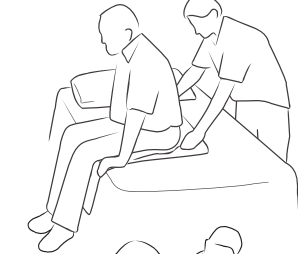


Précautions à prendre durant l'usage:

Assurez-vous que les freins sont appliqués sur le fauteuil ou le lit avant de faire le transfert.

Assurez-vous que la toile est bien placée avec la surface glissante à l'intérieur.



Insérer la toile sous le patient soit en tournant le patient sur la toile ou en lui demandant de se placer sur la toile. Autant que possible, demandez la coopération du patient pendant le transfert.

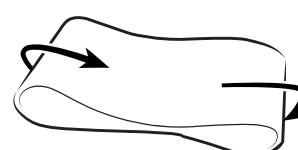


Pour retirer la toile, placez votre main entre les 2 épaisseurs. Agripper le coin du matériel le plus éloigné. En tirant vers le centre, vous pourrez inverser la toile.



Instructions pour le lavage:

Laver à la main ou à la machine. 40° celsius. Étendre pour sécher. Ne pas repasser ou exposer à de hautes températures. Ne pas se servir de javellisant.

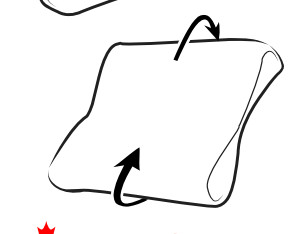

Mise en garde: Veuillez vous servir de ce produit conformément aux politiques de votre organisation. Ne pas laisser ce produit où il pourrait être exposé aux flammes. Avant de vous servir de ce produit, assurez-vous que la toile glissante est le moyen approprié de transfert pour le patient en question.

