

Glider

CATALOGUE

VERTICALISATION ACTIVE



EasyStand 

Glider

moyen & grand

La verticalisation active permet aux gens d'amorcer les mouvements des membres inférieurs tandis que dans le même temps, les bras, les épaules et les pectoraux travaillent pour actionner les poignées. Une tierce personne peut même actionner les poignées pour effectuer un entraînement complet pour quelqu'un d'autre. Le Glider est un verticalisateur assis-debout avec une assise articulée pour ne pas gêner le mouvement et le travail des amplitudes articulaires. Le Glider est un verticalisateur supérieur qui augmente les bienfaits de la verticalisation et garde le corps en forme pour les découvertes médicales.



Glider

La verticalisation active

- La verticalisation active augmente les nombreux bienfaits de la verticalisation passive. Le Glider augmente les amplitudes des membres inférieurs et simultanément reprends des forces dans le tronc et les membres supérieurs.

Mouvement

- Permet le mouvement des chevilles, des genoux et des hanches pour augmenter les amplitudes articulaires, facilite la respiration, augmente l'endurance cardiovasculaire et permet une optimisation de la mise en charge des membres inférieurs. Exercer des mouvements de tractions et de répulsions avec différents degrés de résistance. Les poignées permettent une tierce personne de faciliter le mouvement.

Une transition sûre

- L'Evolv assure une transition sûre avec le support de l'assise, les supports genoux et le cale thorax vers la station debout.

Utilisation rapide

- Pour les utilisateurs qui peuvent effectuer un transfert latéral les supports-genoux s'escamotent pour faciliter le transfert.

Confortable

- Les supports genoux, siège, dossier et cale thorax sont tous bien coussinés. Une assise dotée d'un insert Roho Dry Flotation anti-escarre est aussi disponible en option pour rendre le Glider accessible même aux utilisateurs les plus sensibles au niveau du sacrum et des ischions.

avantage

Acclimation de la verticalisation

- Les nouveaux blessés médullaires ont souvent besoin du temps pour s'habituer à la verticalisation. La technologie assise-debout permet l'utilisateur la possibilité de s'arrêter à tout moment entre la station assise et la station debout.

Une bonne extension des hanches et genoux

- Le Glider permet une bonne extension des hanches, genoux et chevilles au cours du mouvement elliptique.

La modularité

- Support compréhensif ou minime selon le besoin. Il existe plus que 35 options de positionnement pour supporter les besoins les plus complexes.

Préparation pour les systèmes d'exosquelette

- Pour bien utiliser un système d'exosquelette c'est nécessaire d'avoir la capacité de se mettre et rester debout dans un verticalisateur. En plus le Glider permet progressivement d'amplifier l'extension des membres inférieures. En maintenant un étirement soutenu avec une mise en charge au cours de la séance. C'est le matériel idéal pour vous préparer d'utiliser un système d'exosquelette.



Caractéristiques techniques


	moyen	grand
Poids max.	90kg	127kg
Taille min. - Taille max.	122-168cm	152-188cm
Hauteur assise/repose-pied	34-42cm	39-47cm
Profondeur de l'assise	51-64cm	24"-29" (61-74cm)
Hauteur d'assise à partir du sol	55cm	55cm
Poids de l'unité de base	78kg	81kg
Embase cadre	67x104cm	67x104cm

additional specifications at easystand.com

Glider moyen

Options

EasyStand Glider comporte: vérins avec un réglage de la résistance, un jeu de quatre roulettes, dont deux à l'arrière pivotantes avec système de blocage, vérin hydraulique, assise plat, les support-genoux, repose-pieds réglables en hauteur, tablette avec cale thorax et poignées.

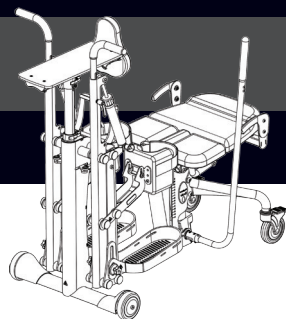

122-167cm



PNG50499 Réglage facile de siège

Réglage plus facile du profondeur de la siège.



PNG50010 Lift électrique

Verticalise la personne plus facilement, sans acoup. Il comprend un vérin de type LINAK contrôler par télécommande, une batterie et un chargeur. Ce système est équipé d'un mécanisme d'arrêt d'urgence.



PNG50328 Vérin hydraulique - manette amovible

Manette amovible et réglable pour chaque utilisateur.



PNG50044 Poignée multiprises

Vient en jonction sur le levier de pompage. Elle offre plus de possibilités pour une meilleure préhension. Ce système nécessite le levier de pompage.



PNG50070 Poignée en « T »

Permet une meilleure accessibilité au levier de pompage pour l'utilisateur aux amplitudes articulaires limitées. Cette extension rajoute 15cm de part et d'autre du levier. Ce système nécessite le levier de pompage.



PNG30030 Sangle de maintien du pied -38cm

Le réglage Velcro® maintient les pieds dans alignement avec plusieurs positions de fixation pour un positionnement correct du pied



PNG50505 Sangle de maintien du pied -53cm

Le réglage Velcro® maintient les pieds dans alignement avec plusieurs positions de fixation pour un positionnement correct du pied



PNG30031 Double sangle de maintien 38cm

Le réglage Velcro® doublé maintient les pieds dans alignement avec plusieurs positions de fixation pour un positionnement correct du pied.



PNG50506 Double sangle de maintien 53cm

Le réglage Velcro® doublé maintient les pieds dans alignement avec plusieurs positions de fixation pour un positionnement correct du pied.



PNG50351 Assise type Roho®

Cette assise est dotée d'un insert Roho Dry Flotation anti-escarre afin de rendre ce système accessible même aux utilisateurs les plus sensibles au niveau du sacrum et des ischiens. Dimensions de l'insert 18x30cm



P80246 Localisateur de position

Permet de mesurer l'angle de verticalisation avec précision.



PNG50345 Cale-hanche-taille 23-28cm

Apporte un bon maintien du bassin et permet de garder un bon alignement des membres inférieurs pendant le processus de verticalisation. Ce système de positionnement amovible pour les transferts latéraux offre également de multiples réglages.



PNG50374 Cale-hanche-taille 30-43cm

Apporte un bon maintien du bassin et permet de garder un bon alignement des membres inférieurs pendant le processus de verticalisation. Ce système de positionnement amovible pour les transferts latéraux offre également de multiples réglages.



PNG50251 Extensions des poignées des bras coulissants

Poignées en forme 'U' rapprochent le corps 15cm de plus (15cm)



PNG50295 Contre-appui pectoral sans tablette

Apporte un bon maintien du torse sans tablette



PNG50066 Dossier plat 38cm



PNG50067 Dossier plat 48cm



PNG50062 Dossier incurvé 38cm



PNG50068 Dossier incurvé 48cm



PNG50171 Dossier plat 38cm amovible

Dossier amovible pour faciliter les transferts.



PNG50173 Dossier plat 48cm amovible

Dossier amovible pour faciliter les transferts.



PNG50172 Dossier incurvé 38cm amovible
Dossier amovible pour faciliter les transferts.



PNG50174 Dossier incurvé 48cm amovible
Dossier amovible pour faciliter les transferts.



PNG30029 Ceinture de maintien, fermoir velcro
Facile à mettre, elle apporte encore plus de sécurité lors de la verticalisation. Dossier nécessaire (Circonférence : 66 à 140cm).



PNG30306 Ceinture de maintien, fermoir velcro
Facile à mettre, elle apporte encore plus de sécurité lors de la verticalisation. Dossier nécessaire (Circonférence : 97-170cm)



PNG30028 Ceinture de maintien, fermoir à boucle
Facile à mettre, elle apporte encore plus de sécurité lors de la verticalisation. Dossier nécessaire (Circonférence : 66 à 140cm).



PNG50192 Ceinture de maintien pectorale - p
Permet de stabiliser le tronc pour plus de confort. Dossier indispensable (Coussinet de rembourrage 13x48cm, circonférence du tronc 76-117cm).



PNG50193 Ceinture de maintien pectorale - m
Permet de stabiliser le tronc pour plus de confort. Dossier indispensable (Coussinet de rembourrage 13x48cm, circonférence du tronc 86-137cm).



PNG50504 Ceinture de maintien pectorale - g
Permet de stabiliser le tronc pour plus de confort. Dossier indispensable (Coussinet de rembourrage 13x48cm, circonférence du tronc 117-168cm)



P600002 Manivelle de réglage d'inclinaison du dossier
Facilite le réglage de l'inclinaison du dossier, très pratique pour les professionnels et une utilisation intensive. (Dossier indispensable, remplace la poignée standard).



PNG50034 Patte de montage pour accessoires
Indispensable pour le montage d'un harnais de positionnement, des cale-troncs, d'un appui-tête ou des poignées de poussée. (Dossier nécessaire.)



PNG30170 Harnais de positionnement croisé-m
Système en néoprène, réglable en tension par bouton presseur. (Dimensions: moyen 28x24cm)
Dossier et patte de montage nécessaires.



PNG30056 Harnais de positionnement croisé-g
Système en néoprène, réglable en tension par bouton presseur. (Dimensions: moyen 32x26cm)
Dossier et patte de montage nécessaires.



PNG30171 Harnais de positionnement en Y-moyen
Système en néoprène, réglable en tension par bouton presseur. (Dimensions: moyen 28x24cm, Grand 44x29cm.)
Dossier et patte de montage nécessaires.



PNG30021 Harnais de positionnement en Y-grand
Système en néoprène, réglable en tension par bouton presseur. (Dimensions: moyen 28x24cm, Grand 52x32cm.)
Dossier et patte de montage nécessaires.



PNG11212 Fixation de harnais mult-hauteur
Fixation pour changer le hauteur du harnais pour bien positionner les épaules d'une personne.



PNG50224 Cale-troncs 23x38cm
Permettent encore plus de stabilité et un recentrage du tronc. Système aux multiples réglages, amovible pour les transferts. (Dossier et patte de montage nécessaires. La paire, plages de réglages : profondeur : 8cm, hauteur : 10 - 30cm, largeur 23x28cm)



PNG50176 Cale-troncs 30x46cm
Permettent encore plus de stabilité et un recentrage du tronc. Système aux multiples réglages, amovible pour les transferts. (Dossier et patte de montage nécessaires. La paire, plages de réglages : profondeur : 8cm, hauteur : 10 - 30cm, largeur 30x46cm)



PNG50240 Appui-tête 53x77cm
Réglable en hauteur, en profondeur sur une plage de 10cm, système articulé pour le plus grand confort de l'utilisateur (dossier et patte de montage nécessaires.)



PNG50037 Head Support-Tall
Height range from seat with a 15" back is 23"-32" (58-81cm). With a 19" tall back it is 25"-34" (64-86cm). Pad size is 7"Hx14"W (18-36cm). Back and accessories mounting bracket required.



PNG50040 Poignées de poussée
Permettent de déplacer le verticalisateur avec plus d'aisance pour un tiers (dossier et patte de montage nécessaires).



P80809 Trousse pour les outils
Permet le rangement des outils de montage du verticalisateur.
Les outils ne sont pas compris.


Glider grand

Options

152-188cm



EasyStand Glider comporte: vérins avec un réglage de la résistance, un jeu de quatre roulettes, dont deux à l'arrière pivotantes avec système de blocage, vérin hydraulique, assise plat, les support-genoux, repose-pieds réglables en hauteur, tablette avec cale thorax et poignées.

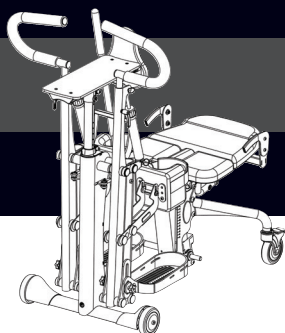

PNG50499 Réglage facile de siège

Réglage plus facile du profondeur de la siège.



PNG50010 Lift électrique

Verticalise la personne plus facilement, sans acoup. Il comprend un vérin de type LINAK controller par télécommande, une batterie et un chargeur. Ce système est équipé d'un mécanisme d'arrêt d'urgence.



PNG50328 Vérin hydraulique - manette amovible

Manette amovible et réglable pour chaque utilisateur.



PNG50044 Poignée multiprises

Vient en jonction sur le levier de pompage. Elle offre plus de possibilités pour une meilleure préhension. Ce système nécessite le levier de pompage.



PNG50070 Poignée en « T »

Permet une meilleure accessibilité au levier de pompage pour l'utilisateur aux amplitudes articulaires limitées. Cette extension rajoute 15cm de part et d'autre du levier. Ce système nécessite le levier de pompage.



PNG30030 Sangle de maintien du pied -38cm

Le réglage Velcro® maintient les pieds dans alignement avec plusieurs positions de fixation pour un positionnement correct du pied



PNG50505 Sangle de maintien du pied -53cm

Le réglage Velcro® maintient les pieds dans alignement avec plusieurs positions de fixation pour un positionnement correct du pied



PNG30031 Double sangle de maintien 38cm

Le réglage Velcro® doublé maintient les pieds dans alignement avec plusieurs positions de fixation pour un positionnement correct du pied.



PNG50506 Double sangle de maintien 53cm

Le réglage Velcro® doublé maintient les pieds dans alignement avec plusieurs positions de fixation pour un positionnement correct du pied.



PNG50351 Assise type Roho®

Cette assise est dotée d'un insert Roho Dry Flotation anti-escarre afin de rendre ce système accessible même aux utilisateurs les plus sensibles au niveau du sacrum et des ischions. Dimensions de l'insert 18x30cm



P80246 Localisateur de position

Permet de mesurer l'angle de verticalisation avec précision.



PNG50345 Cale-hanche-taille 23-28cm

Apporte un bon maintien du bassin et permet de garder un bon alignement des membres inférieurs pendant le processus de verticalisation. Ce système de positionnement amovible pour les transferts latéraux offre également de multiples réglages.



PNG50374 Cale-hanche-taille 30-43cm

Apporte un bon maintien du bassin et permet de garder un bon alignement des membres inférieurs pendant le processus de verticalisation. Ce système de positionnement amovible pour les transferts latéraux offre également de multiples réglages.



PNG50295 Contre-appui pectoral sans tablette

Apporte un bon maintien du torso sans tablette



PNG50066 Dossier plat 38cm



PNG50067 Dossier plat 48cm



PNG50062 Dossier incurvé 38cm



PNG50068 Dossier incurvé 48cm



PNG50171 Dossier plat 38cm amovible

Dossier amovible pour faciliter les transferts.



PNG50173 Dossier plat 48cm amovible

Dossier amovible pour faciliter les transferts.



PNG50174 Dossier incurvé 48cm amovible

Dossier amovible pour faciliter les transferts.



PNG30170 Harnais de positionnement croisé-m

Système en néoprène, réglable en tension par bouton pressoir. (Dimensions: moyen 28x24cm)
Dossier et patte de montage nécessaires.



PNG50040 Poignées de poussée

Permettent de déplacer le verticalisateur avec plus d'aisance pour un tiers (dossier et patte de montage nécessaires).



PNG30029 Ceinture de maintien, fermoir velcro

Facile à mettre, elle apporte encore plus de sécurité lors de la verticalisation. Dossier nécessaire (Circonférence : 66 à 140cm).



PNG30056 Harnais de positionnement croisé-g

Système en néoprène, réglable en tension par bouton pressoir. (Dimensions: moyen 32x26cm)
Dossier et patte de montage nécessaires.



P80809 Trousse pour les outils

Permet le rangement des outils de montage du verticalisateur.
Les outils ne sont pas compris.



PNG30306 Ceinture de maintien, fermoir velcro

Facile à mettre, elle apporte encore plus de sécurité lors de la verticalisation. Dossier nécessaire (Circonférence : 97-170cm)



PNG30171 Harnais de positionnement en Y-moyen

Système en néoprène, réglable en tension par bouton pressoir. (Dimensions: moyen 28x24cm, Grand 44x29cm.)
Dossier et patte de montage nécessaires.



PNG30028 Ceinture de maintien, fermoir à boucle

Facile à mettre, elle apporte encore plus de sécurité lors de la verticalisation. Dossier nécessaire (Circonférence : 66 à 140cm).



PNG30021 Harnais de positionnement en Y-grand

Système en néoprène, réglable en tension par bouton pressoir. (Dimensions: moyen 28x24cm, Grand 52x32cm.)
Dossier et patte de montage nécessaires.



PNG50192 Ceinture de maintien pectorale - p

Permet de stabiliser le tronc pour plus de confort. Dossier indispensable (Coussinet de rembourrage 13x48cm, circonférence du tronc 76-117cm).




PNG11212 Fixation de harnais mult-height

Fixation pour changer le hauteur du harnais pour bien positionner les épaules d'une personne.



PNG50193 Ceinture de maintien pectorale - m

Permet de stabiliser le tronc pour plus de confort. Dossier indispensable (Coussinet de rembourrage 13x48cm, circonférence du tronc 86-137cm).

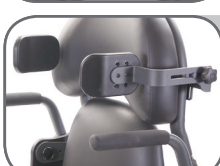

PNG50224 Cale-troncs 23x38cm

Permettent encore plus de stabilité et un recentrage du tronc. Système aux multiples réglages, amovible pour les transferts. (Dossier et patte de montage nécessaires. La paire, plages de réglages : profondeur : 8cm, hauteur : 10 - 30cm, largeur 23x28cm)



PNG50504 Ceinture de maintien pectorale - g

Permet de stabiliser le tronc pour plus de confort. Dossier indispensable (Coussinet de rembourrage 13x48cm, circonférence du tronc 117-168cm)



PNG50176 Cale-troncs 30x46cm

Permettent encore plus de stabilité et un recentrage du tronc. Système aux multiples réglages, amovible pour les transferts. (Dossier et patte de montage nécessaires. La paire, plages de réglages : profondeur : 8cm, hauteur : 10 - 30cm, largeur 30x46cm)



P600002 Manivelle de réglage d'inclinaison du dossier

Facilite le réglage de l'inclinaison du dossier, très pratique pour les professionnels et une utilisation intensive. (Dossier indispensable, remplace la poignée standard).



PNG50240 Appui-tête 53x77cm

Réglable en hauteur, en profondeur sur une plage de 10cm, système articulé pour le plus grand confort de l'utilisateur (dossier et patte de montage nécessaires.)



PNG50034 Patte de montage pour accessoires

Indispensable pour le montage d'un harnais de positionnement, des cale-troncs, d'un appui-tête ou des poignées de poussée. (Dossier nécessaire.)



PNG50037 Appui-tête 61x85cm

Réglable en hauteur, en profondeur sur une plage de 10cm, système articulé pour le plus grand confort de l'utilisateur (dossier et patte de montage nécessaires.)



EasyStandli

Altimate Medical, Inc.
262 West First Street
Morton, MN 56270 USA
Tel: 800.342.8968 • 507.697.6393
Fax: 877.342.8968 • 507.697.6900
info@easystand.com • easystand.com

Standing technology should only be used under the guidance of a physician with recommendations for standing program protocol and any medical precautions. Standing programs should be monitored by the attending therapist.

AMI maintains a policy of continual product improvement and reserves the right to change features, specifications, and prices without prior notification. Check with AMI for latest information.

FORM GLIDERCAT012417 REV A Copyright © 2017 Altimate Medical, Inc. All rights reserved. Printed in the USA.