




Surface thérapeutique hybride Atlas, ATL3580

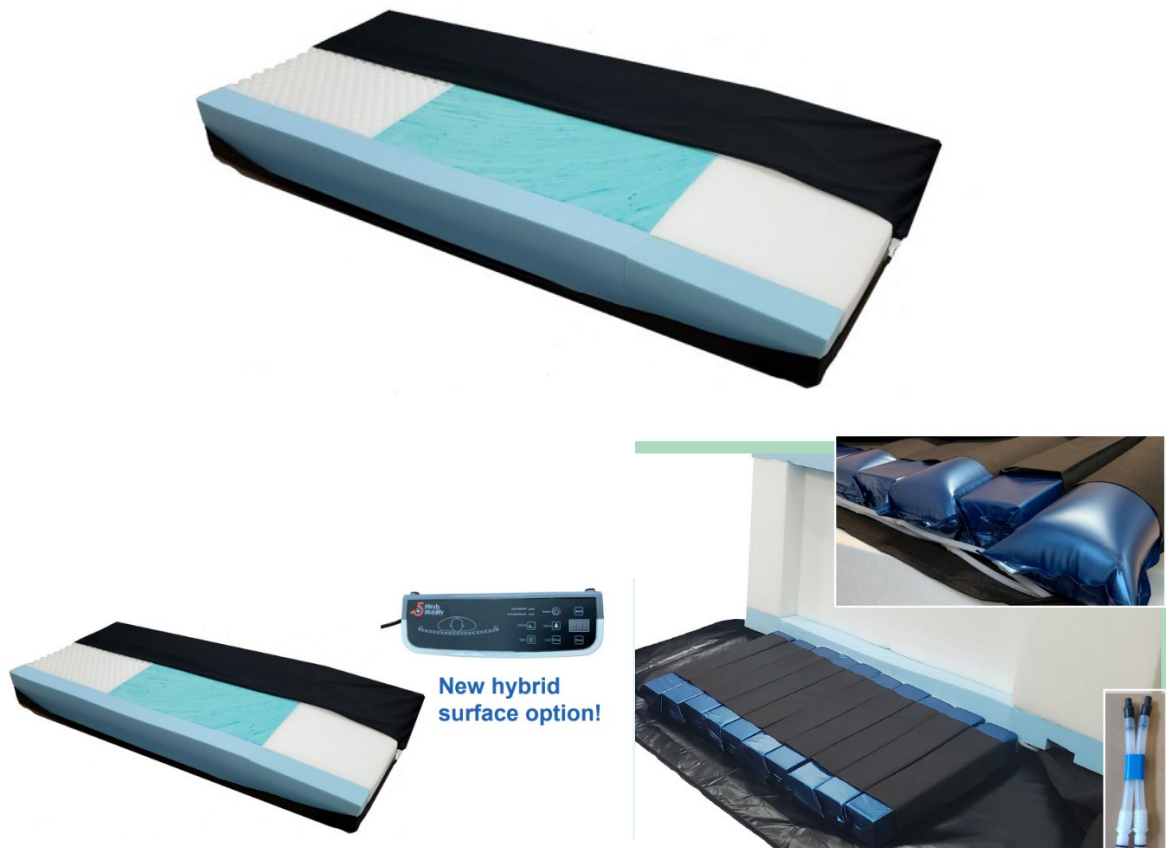

L'Atlas est un matelas non motorisé et auto-ajustable qui utilise la technologie d'égalisation pour fournir une redistribution maximale de la pression pour la prévention et le traitement des plaies de pression.

Commençant par la tête, la mousse alambiquée à haute résilience améliore la mobilité du haut du corps du client. Vient ensuite une couche supérieure de mousse tourbillonnante visco gel climat frais au niveau du torse et de la section centrale pour l'immersion et la dissipation de la chaleur, suivie d'une section de pied inclinée de 5 degrés faite de mousse Serene™ pour aider à transférer l'excès de pression des talons. Sous la couche supérieure, des chambres interconnectées assurent la redistribution de la pression, et il y a des bordures fermes de 4 » de large pour assurer un bord de transfert solide.

Caractéristiques d'Atlas Hybrid Therapeutic Surface :

- Convient aux clients vulnérables à risque de plaies de pression
- Chambres et vannes interconnectées pour la redistribution de la pression
- Convertit en surface d'air motorisée avec APT
- La section inclinée du pied aide à réduire la pression des talons
- Bordures fermes de 4" de large pour des transferts en toute sécurité
- Couvercle extensible à quatre voies résistant aux fluides Startex

Spécifications:

- Capacité de poids maximale : 700 lb
- Atlas est de 7"H, disponible en six largeurs: 35" / 39" / 42" / 48" / 54" / 60
- Deux longueurs : 80" / 84"