



## Ajustable

Le Neptune se déplace verticalement entre 13.25" et 30" par vérin électrique

## Modulaire

Un des seuls dans le marché à être modifiable en longueur et/ou largeur

## Léger

Le Neptune est un des plus léger de la catégorie des lits médicalisés au Québec

## Facile d'entretien

Boîte de contrôle accessible sur le côté du châssis

## Sécuritaire

Les quatres roues sont munies de freins. Certaines fonctions de la télécommande peuvent être bloquées

## Robuste

Garantie 5 ans (télécommande 1 an)

## Caractéristiques incluses:


- Télécommande rétro-éclairée – 8 fonctions pour ajustement du lit
- Ridelles de 1/2 longueur escamotables qui suivent le relève-buste
- 3 moteurs DC permettent un fonctionnement doux et silencieux
- La surface thérapeutique en grillage offre un support ultime pour les matelas de prévention
- La surface en 3 sections procure une diversité de positions autant confortables que thérapeutiques
- 4 roues avec freins pour plus de sécurité

## Modulaire:

- Modification de la largeur du lit de 36 à 39 pouces
- Extension de la longueur du lit à 84 pouces

## Options:

- Frein central de sécurité
- Deux options types de ridelles :
  - 3/4 longueur
  - Pleine longueur en bois avec dossier coordonnés
- Batterie d'urgence
- Contrôle infirmier intégré dans le pied de lit
- Veilleuse de nuit aimantée, reliée à la télécommande, qui se place sur le châssis

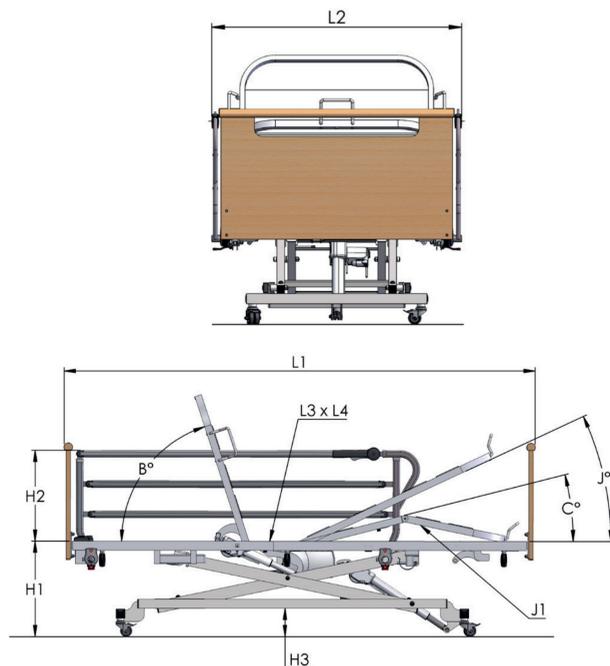

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

ces données dimensionnelles peuvent varier en fonction des tolérances de fabrication

<b>L1</b>	longueur hors tout	82"
<b>L2</b>	largeur hors tout	39"
<b>L3</b>	longueur plan de couchage	78.5"
<b>L4</b>	largeur plan de couchage	35.5"
<b>H1</b>	hauteur max (sol/sommier) hauteur min (sol/sommier)	30" 13.25"
<b>H2</b>	hauteur galerie pliante relevée	16"
<b>H3</b>	hauteur sous châssis	5.12"
<b>B</b>	angle max relève buste	70°
<b>C</b>	angle max relève cuisses	23°
<b>J</b>	angle max relève jambes	21°
<b>J1</b>	angle max relève jambes 3P	12° baissé / 24° relevé relève cuisse position max

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Type couchage</b>	GRILLAGE
<b>Sommier divisible</b>	OUI
<b>Dispositifs pour potence (nombre)</b>	2
<b>Dispositifs pour tige porte-serum (nombre)</b>	4
<b>Finition époxy</b>	GRIS RAL 7035
<b>Équipement électrique</b>	Classe 2 - Type BF - Protection IP66 - Puissance 6000 N (HV) & 3500 N (RB, RJ ou plicature)
<b>Capacité de levage (patient + matelas + accessoires)</b>	450 lb
<b>Garantie « électrique &amp; mécanique »</b>	5 ans (télécommande = 1 an)
<b>Garantie « dossier &amp; accessoires »</b>	1 an