



Série R – Métal décoratif

Illustré avec les appuis-bras optionnels en polyuréthane et le dossier Simplicité sans piqûre en vinyle Cacao standard.



Série W – Bois

Illustré en modèle Déco avec teinture acajou et dossier style Classique en vinyle Cacao standard.



Série T – Style Transitionnel

Illustré avec teinture naturelle et en vinyle Cacao standard.

Diminuez les risques de chutes et profitez des bénéfices reconnus du bercement pour la santé grâce à un fauteuil sécuritaire et breveté qui peut réduire les heures-soins.

Selon des témoignages de professionnels et gestionnaires de soins de longue durée. Voir les études relatives à la au verso. Brevets CAN 2323398 et US 6406095B1.

Thera-Glide®

Le véritable fauteuil berçant sécuritaire

Sécurité, stabilité, confort et durabilité

Le fauteuil Thera-Glide® a fait sa marque dans les milieux de la santé, tant par ses effets thérapeutiques que par ses incroyables caractéristiques de fonctionnalité et de sécurité. Son mécanisme breveté d'immobilisation automatique rend le fauteuil fixe lors de la levée et permet le bercement lorsque la personne est complètement installée. Le système est facile, silencieux et bloque à n'importe quelle position. Des appuis-bras allongés pour une meilleure prise et des anti-basculés latéraux pour la stabilité sont des éléments de sécurité qui en font un fauteuil unique.

Selon le modèle, les possibilités d'ajustements et d'accessoires permettent d'adapter le Thera-Glide® en fonction de vos besoins spécifiques. Il est d'entretien facile grâce aux recouvrements amovibles et aux matériaux utilisés.



Fixe lors de l'assise



Berce librement



Fixe lors du lever

Série T – Style Transitionnel

Le Thera-Glide® Transitionnel offre toutes les caractéristiques de sécurité de nos autres fauteuils berçants tout en mariant la chaleur du style traditionnel avec le modernisme du style contemporain.

Grâce à ses coussins profilés sans piqûre faciles à nettoyer, ses confortables appuis-bras en bois courbé, sa hauteur ajustable et sa capacité maximale de 350 livres (159 kg), presque tout le monde peut profiter de son bercement relaxant et sécuritaire.



Série R – Métal décoratif



La structure robuste et élégante du Thera-Glide® de métal décoratif facilite le nettoyage. Accompagné du dossier Simplicité sans piqûre et des appuis-bras de polyuréthane en option, il peut répondre à de strictes normes de désinfection.

Choisissez parmi 3 styles de dossier:

- 1 Simplicité (sans piqûre, illustré en page couverture)
- 2 Classique
- 3 Confort Plus



2



3



RA-01



R-C4



R-C3



R-C7



R-020

R-030


Série W – Bois

Les composantes de bois de ce Thera-Glide® sont fixés à une structure intérieure en acier robuste et durable. Deux modèles de cadrages, quatre teintures de bois et trois styles de dossier permettent de personnaliser le Thera-Glide® de bois selon vos goûts.

Consultez notre site Web pour plus d'images avec différentes options et configurations : <http://www.lpamedical.com>



Fauteuil montré avec le cache-base RA-28 en option.

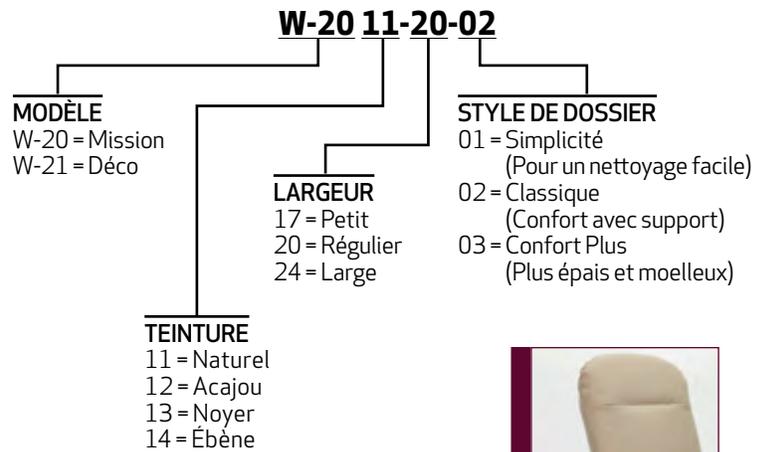


Caractéristiques techniques

Modèle	Série R – Métal décoratif			Série W - Bois			Série T - Transitionnel
	R-505 Petit	R-605 Régulier	R-705 Large	W-2xxx-17-xx Petit	W-2xxx-20-xx Régulier	W-2xxx-24-xx Large	T-40xx-22
Hauteur totale	44" à 47" / 112 cm à 119 cm			44" à 47" / 112 à 119 cm			42 1/2" à 45 1/2" / 108 à 116 cm
Hauteur siège/sol	Ajustable de 16" à 19" / 41 à 48 cm						
Largeur totale	22" / 56 cm	26" / 66 cm	29" / 74 cm	22 1/2" / 57 cm	26 1/2" / 67 cm	29 1/2" / 75 cm	27 1/4" / 69 cm
Largeur de l'assise	16 1/2" / 42 cm	20 1/2" / 52 cm	23 1/2" / 60 cm	16 1/2" / 42 cm	20 1/2" / 52 cm	23 1/2" / 60 cm	22" / 56 cm
Haut. appui-bras/siège	8" / 20 cm			8" / 20 cm			7" / 18 cm
Profondeur	32" / 81 cm			33" / 84 cm			33" / 84 cm
Profondeur d'assise	17 1/2" / 45 cm			17" / 43 cm			18" / 46 cm
Hauteur de dossier	31" / 79 cm			29" / 74 cm			28" / 71 cm
Capacité maximale	300 lbs / 136 kg		450 lbs / 205 kg	275 lbs / 125 kg		450 lbs / 205 kg	350 lbs / 159 kg
Poids	58 lbs / 26 kg	61 lbs / 28 kg	67 lbs / 31 kg	57 lbs / 26 kg	60 lbs / 27 kg	66 lbs / 30 kg	75 lbs / 34 kg

Veuillez noter que les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Les couleurs montrées sur les photos peuvent être différentes du produit réel.

Finitions de bois

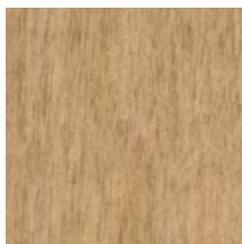

11 - Naturel (Séries W et T)



12 - Acajou (Séries W et T)



13 - Noyer (Séries W et T)




14 - Ébène (Séries W et T)

Recouvrements standard

Les fauteuils Thera-Glide® sont offerts de série en quatre garnitures de vinyle. Des tissus de Crypton sont aussi disponibles, et nous acceptons les tissus fournis par le client (COM).

Cuirettes standard

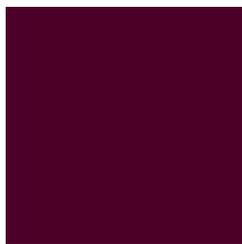

Bourgogne



Bleu Saphir



Cacao



Vert Océan

Options et accessoires

Item	Description	Série R	Série W	Série T
R-C1	Profondeur d'assise et angle de dossier ajustables 15" à 18" (38 à 46 cm) / 95° à 115°	Opt. sur R-605, de série sur modèles R-505 et R-705	Opt. sur 20", de série sur modèles 17" et 24"	—
R-C1S	Profondeur d'assise et angle de dossier ajustables 13 1/2" à 16 1/2" (34 à 42 cm) / 95° - 115°	✓	✓	—
R-C2	Panneaux latéraux	✓	—	—
R-C3	Support rangement de table	✓	✓	—
R-C4	Pattes ajustables pour hauteur d'assise 21" à 24"	✓	—	—
R-C7	Appuis-bras en polyuréthane	✓	—	—
R-C9	Groupe renforcement et amortisseur de fin de course (inclut R-C1)	✓	—	—
R-020	Tabouret oscillant en métal	✓	—	—
R-030	Tabouret fixe en métal	✓	—	—
RA-01	Table d'activités opaque	✓	✓	—
RA-02	Table d'activités transparente	✓	✓	—
RA-03	Sangles de retenue de table fixée	✓	✓	—
RA-03A	Sangles de retenue de table englobante	✓	✓	—
RA-04	Ensemble de roues arrière pour Thera-Glide® de bois	—	✓	✓
RA-09	Sac de rangement latéral	✓	✓	—
RA-10	Releveur d'assise 1" (2,5 cm)	✓	✓	—
RA-11	Releveur d'assise 1 1/2" (4 cm)	✓	✓	—
RA-12	Releveur d'assise incliné 2" (5 cm)	✓	✓	—
RA-13	Releveur et aplanisseur d'assise à inclinaison arrière	✓	✓	—
RA-19	Ensemble butée d'abduction et toile universelle noire	✓	✓	—
RA-23	Ensemble toile universelle et appuis latéraux 4" (10cm)	✓	✓	✓
RA-24	Ensemble toile universelle et appuis latéraux 6" (15cm)	✓	✓	✓
RA-28	Cache-base	—	✓	incl.
RB-18	Support cervical	✓	✓	—
WOF-22	Tabouret avec appui-pieds	—	✓	✓
Z-C8	Coussin Pré-cure	✓	✓	—

✓ : Disponible — : Non disponible

Caractéristiques de série

	Série R	Série W	Série T
Appuis-bras allongés avec prise ergonomique	✓	✓	✓
Ensemble de coussins amovibles pour un nettoyage facile	✓	✓	✓
Système de blocage automatique à positions infinies	✓	✓	✓
Verrouillage du mécanisme de blocage	✓	✓	✓
Anti-basculés latéraux	✓	✓	✓
Roulettes arrière pour aider le déplacement	✓	○	○
Hauteur d'assise ajustable	✓	✓	✓
Siège à suspension de ressorts sinueux	—	—	✓
Cache-base de couleur assortie	—	○	✓

✓ : De série ○ : Option — : Non disponible



Idéal pour sécuriser les poupons et les mamans.

Les bénéfices du bercement

Connu depuis très longtemps, l'effet relaxant et tranquillisant du bercement peut améliorer de façon significative la qualité de vie des personnes en perte d'autonomie et peut réduire leur consommation d'anti-anxiolytiques et peut aider à réduire la consommation de médication.

Une étude de l'université de Rochester, Rochester NY démontre même les effets thérapeutiques pour aider à combattre l'anxiété et la dépression. Des bénéfices notables ont été observés pour des cas d'Alzheimer et de démence. Dans un autre domaine, le Child Study Center, School of Medicine, de l'université Yale a démontré, par une étude sur plus de 300 familles, que le bercement pouvait apporter des bénéfices importants pour les nouveaux-nés ainsi que leurs mères.

Si le bercement a des effets positifs reconnus, afin qu'il puisse se pratiquer de façon sécuritaire, LPA Médical a développé un fauteuil ergonomique doté d'un dispositif de sécurité autobloquant breveté permettant de rendre le bercement sécuritaire pour les personnes en perte d'autonomie. Ce fauteuil est commercialisé sous le nom de Thera-Glide®.

Visitez notre site Web pour consulter les liens vers ces études.



Nos produits – Ligne complète



Comp-Position
Fauteuil de positionnement



Dyn-Ergo
Fauteuil de mobilité



Évolution
Fauteuil de mobilité



Harmonie
Fauteuil inclinable



Nomade
Fauteuil de repos mobile



Optimum
Fauteuil Posturo-Pédic



Thera-Glide® de bois
Fauteuil berçant



Thera-Glide® de métal
Fauteuil berçant autobloquant



Thera-Glide® Transitionnel
Fauteuil berçant autobloquant



Utilité
Fauteuil tout usage polyvalent



Versatile
Fauteuil de repos ajustable



Pré-cure
Cousin de substitution pour insertion



Surface anti-glissement
Outil de positionnement

Contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits, ou visitez notre site Web.

