

EVO-MAT


SÉRIE 5000

CARACTÉRISTIQUES

- Mousse de surface en mousse mémoire cube*
- Mousses à base de soya certifiées OEKO-TEX® pour un respect de l'environnement
- Rebords de mousse ferme qui facilitent les transferts de patients (sur modèle 5200 seulement)
- Base en mousse haute résilience anti-affaissement**

MODÈLE 5100

(sans bordure latérale)

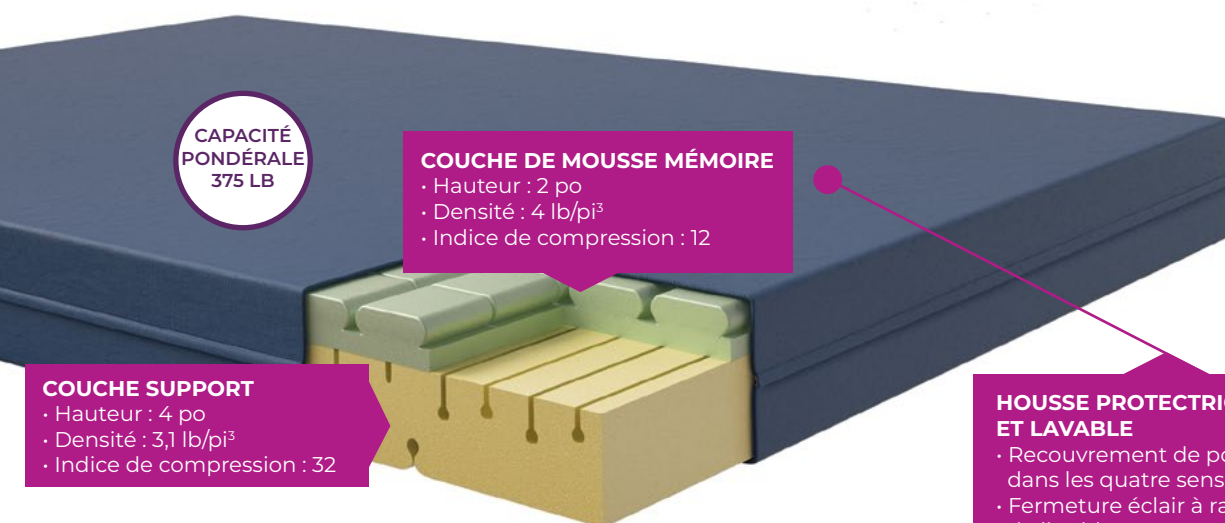

CAPACITÉ
PONDÉRALE
375 LB

COUCHE DE MOUSSE MÉMOIRE

- Hauteur : 2 po
- Densité : 4 lb/pi³
- Indice de compression : 12

COUCHE SUPPORT

- Hauteur : 4 po
- Densité : 3,1 lb/pi³
- Indice de compression : 32

HOUSSE PROTECTRICE IMPERMÉABLE ET LAVABLE

- Recouvrement de polyuréthane extensible dans les quatre sens
- Fermeture éclair à rabat contre l'infiltration de liquide
- Se nettoie sur place suivant le mode d'entretien
- Hautement résistante

ÉGALEMENT
OFFERT

MODÈLE 5200

(avec bordure latérale)

LE MODÈLE 5200

PRÉSENTE LES MÊMES
CARACTÉRISTIQUES
QUE LE MODÈLE 5100,
MAIS PROPOSE UNE
BORDURE LATÉRALE.

* MOUSSE DE SURFACE EN MOUSSE MÉMOIRE CUBE Pour réduire la pression au maximum et améliorer l'aération.

La mousse réduit les pressions d'interface et les frictions en s'adaptant à la morphologie du patient. La mousse formée de cubes indépendants favorise la circulation de l'air sous la surface, ce qui limite l'accumulation d'humidité, et, donc, la macération et le cisaillement.

La mousse constitue une solution économique pour prévenir les lésions cutanées et les escarres. La mousse mémoire en surface permet d'avoir d'autant moins de points de pression.

** BASE EN MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE ANTI-AFFAISSEMENT

Les entailles à la surface de la base et en dessous de la base permettent une liberté de mouvement plus grande du matelas. Elles limitent la compression de la mousse à l'intérieur du matelas et, par le fait même, les points de pression lorsqu'il est utilisé dans un lit électrique.

OFFERT EN
PLUSIEURS DIMENSIONS

