
Verticalisateur **Sara Flex**
Des détails qui **font toute la différence**

ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP



Sara Flex


Les soins commencent par le souci du détail

ArjoHuntleigh, de par ses 60 ans d'expérience, a appris que l'importance réside aussi dans les détails. Ils sont la différence entre le confort et la douleur, un patient calme ou un patient stressé, un soignant travaillant efficacement ou un soignant essayant toujours de rattraper son retard. Lors du passage d'un patient de la position assise à la position debout, les détails font toute la différence.

Conçu pour faciliter les transferts et les soins quotidiens, Sara® Flex d'ArjoHuntleigh permet à un seul soignant de passer un patient d'une position assise à une position debout de manière sécurisée et confortable, et ce, en un mouvement ergonomique.

Ce sont les détails qui font de chaque transfert (dans un fauteuil roulant, sur les toilettes, sur un siège de douche ou en core dans le cadre de la mobilisation précoce), une expérience positive.


Échelle de mobilité Carl

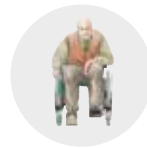

Sara Flex est spécialement conçu pour les patients et résidents incapables de se déplacer sans assistance, mais capables de contribuer à leur mobilité, ou du moins à réaliser une partie de leur mobilité de manière indépendante. Pour plus d'informations sur la Mobilitèque™, veuillez contacter ArjoHuntleigh.

Faciliter les transferts et les soins quotidiennement

Tout commence par une position optimisée

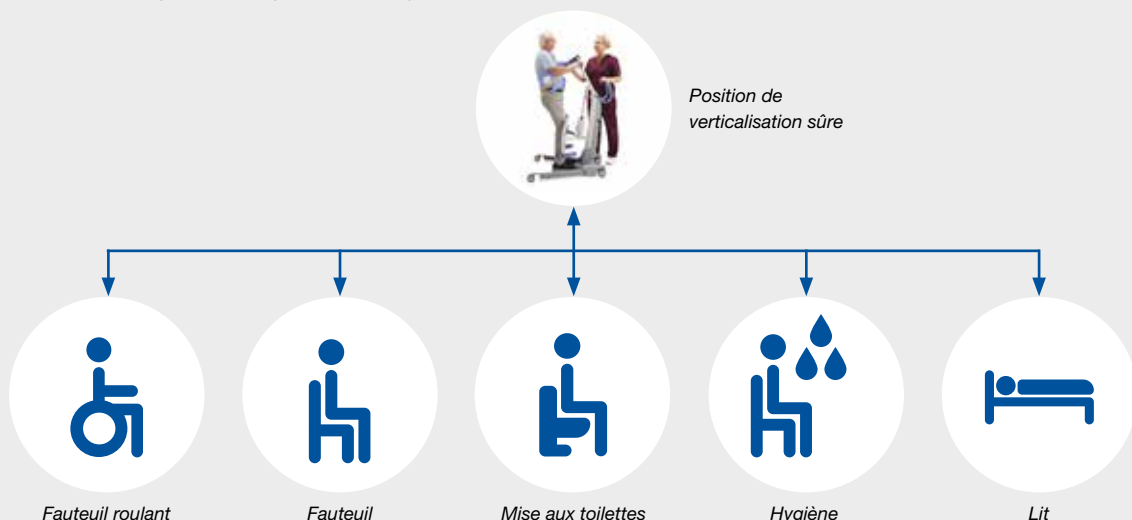

Soutien optimisé du patient

- Favorise le confort et la sécurité tout au long du passage de la position assise à la position debout (avant, pendant, après)

Facile à utiliser avec une grande maniabilité améliorée

- Améliore la maniabilité et ne nécessite aucun ajustement pour faciliter son utilisation

Prise en charge d'un grand nombre de patient

- Permet à un soignant de verticaliser un grand nombre de patients de type «Carl» (cf. niveau de mobilité dans la mobilitèque ArjoHuntleigh)





Repose-jambes flexible en silicone

- Ne nécessite aucun ajustement car sa grande surface (large et haute) répond aux besoins de patients diversifiés en termes de corpulence, tout en fournissant un confort optimisé¹
- Sa conception incurvée avec une surface douce, plus large et flexible soutient les jambes et les genoux tout au long de la verticalisation

Sangle de jambe flexible en silicone

- Positionnement bas et multiples options d'ajustement
- Meilleure adaptabilité pour des tailles et corpulences très diverses
- Garantit le passage confortable des patients d'une position assise à une position debout¹

Mouvement vers l'avant ergonomique

- Le mouvement vers l'avant, en combinaison avec le repose-jambes flexible, permet une verticalisation ergonomique et confortable¹

Compact et léger

- La taille du Sara Flex est optimale, non intrusive et adaptée aux besoins des patients susceptibles d'être impressionnés par un équipement semblant complexe ou encombrant
- Sa conception esthétique permet aux patients vulnérables de rester calmes pendant la verticalisation

Repose-pieds bas avec position horizontale

- Facilite une verticalisation ergonomique spécialement conçue pour une sensation fluide et naturelle pour le patient²
- Optimise le positionnement des pieds tout en favorisant un bon maintien du patient pour améliorer la verticalisation

Télécommande avec affichage facile à utiliser

- Garantit une verticalisation rapide, aisée et en toute sécurité
- Permet aux soignants de travailler étroitement avec leur patient, de lire le poids ou manipuler le lève-personne de manière intuitive

Poignées patient

- Les poignées patient sont faciles à saisir et sont incurvées pour assurer un positionnement confortable des mains, des poignets et des coudes pendant la verticalisation

Poignées soignant


- Prise facile et intuitive, et poignées s'adaptant aux besoins des soignants pour une meilleure ergonomie de travail avec efficacité d'ergonomie intuitive

Conçu pour
faciliter les transferts
quotidiens



Caractéristiques du produit

Exigences en termes d'espace

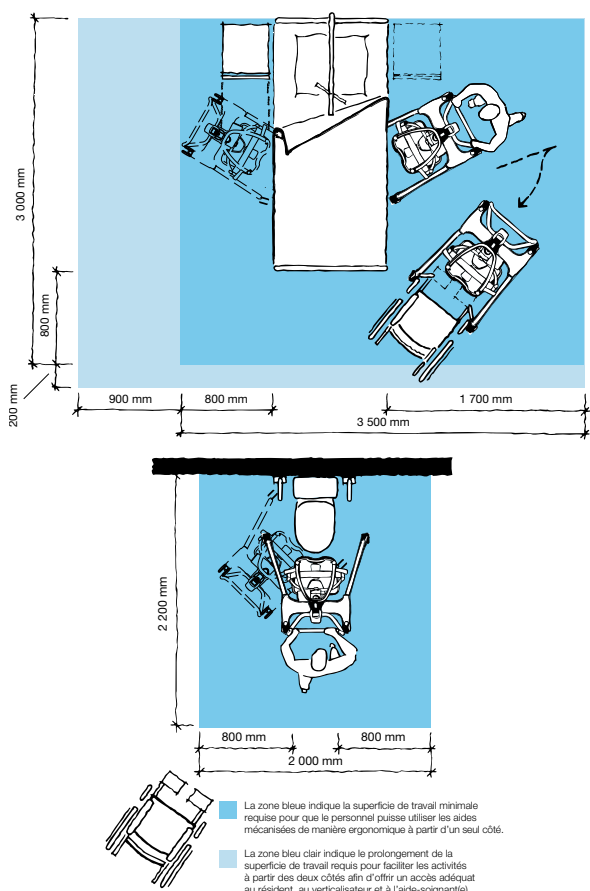

Mobilité

Convient à Carl



C Carl est dans une chaise roulante et peut difficilement se soutenir seul

Pour plus d'informations sur la Mobilité™, veuillez contacter ArjoHuntleigh.

Informations produit

Capacité maximale admissible	200 kg
Capacité de pesage	200 kg
Poids	52 kg
Poids avec pèse-personne	53,6 kg
Longueur totale	996 mm
Hauteur de levage min.	991 mm
Hauteur de levage max.	1 518 mm
Hauteur totale	1 162 mm
Hauteur du châssis	100,5 mm
Largeur externe, avec pieds rapprochés	660 mm
Largeur externe, avec pieds écartés	1 029 mm
Batterie	24 V CC 4 Ah
Catégorie de protection du lève-personne	IP24
Verre de protection de la télécommande	IPX7
Roulettes à faible friction avec freins sur les deux roulettes arrière	
Indicateur de charge de batterie faible - il affiche la charge restante et indique quand la batterie doit être rechargée	
Indicateur d'heures de fonctionnement - affiche le nombre total d'heures d'utilisation du moteur	
Arrêt d'urgence et bouton de descente d'urgence	

En option

Pèse-personne intégré	
-----------------------	--

Homologations

EN/IEC 60601-1 (TÜV SÜD)	
EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD)	

ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP

ArjoHuntleigh Canada Inc.

90 Matheson Blvd West, Suite 350

Mississauga, Ontario L5R 3R3, CANADA

Phone: 800-665-4831,

Info.Canada@ArjoHuntleigh.com

ArjoHuntleigh est un fournisseur mondial de premier plan de solutions et produits intégrés qui améliorent la vie des patients et résidents à mobilité réduite. Nous aidons les établissements de soins à favoriser le bien-être de leurs patients grâce à des soins quotidiens efficaces, des procédures de stimulation et de mobilité, des solutions d'hygiène, des solutions favorisant la manutention du patient en toute sécurité, mais également des solutions pour la prévention des escarres et de la thrombo-embolie veineuse, des solutions baratriques et, enfin, des études cliniques. Grâce à nos larges connaissances et à notre grande expérience, nous nous efforçons d'améliorer l'efficacité et de garantir un environnement digne et plus sûr tant au personnel soignant qu'aux patients/résidents.

Références : 1. Données internes 2. Données internes

01.KK.29.1.CA.1.AHG – Sara Flex. Date: October 2017. Seules les pièces ArjoHuntleigh, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires ArjoHuntleigh. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. © et TM sont des marques déposées du groupe de sociétés ArjoHuntleigh. © ArjoHuntleigh, 2017. Sara Flex est un dispositif médical de classe I, fabriqué par ArjoHuntleigh. Il est destiné aux soins d'hygiène assistés dans des environnements de soins. Lisez attentivement la notice d'utilisation.